

FMP2 Maske Fonna/CE-0161 - Ürün No. MC-P088-50-001

Maskenin açıklaması:

Maske, EN 1827: 2009-11, FONNA PPE sınıf 3'e göre partikül filtreli bir yarım maskedir. Kaçak akımları önlemek ve optimum konforu sağlamak için maskenin geometrisi, yüzün çevresine en uygun şekilde uyarlanmıştır. Uzunluğu hassas bir şekilde ayarlanabilen 2 elastik lastik bant, maskeyi kafaya sabitleme ve takması rahattır. Elastik bantlar yeterli gerilme mukavemetine sahipse, maske yüzün çevresine yakın durur. Geniş kenar kıvrımı, maskenin yeterince sızdırmaz olmasını sağlar.


Maske, PET'ten yapılmış bir tabandan ve bir O-ring aracılığıyla sabitlenen değiştirilebilir bir filtreden oluşur. Değiştirilebilir filtre, bir filtre katmanı ve bir taşıyıcı malzemeden oluşur. Taşıyıcı malzeme "dokumasız bükümlü yapağı" dan oluşur. Filtre katmanı, dokumasız SMMS (meltblown) malzemeden oluşur. O-ring, değiştirilebilir filtreyi maske gövdesine sabitleme. Burun boşluğundaki yıkanabilir, kapalı hücreli köpük, maskenin rahatça oturmasını sağlar. Filtre değiştirilebilir. Maske, şu anda geçerli olan sürümde EN standartlarına tabidir.

Uygulama alanları:

Özellikle enfeksiyon koruması için kullanım içindir. NR (tekrar kullanılmaz); 8 saatlik tek kullanıma karşılık gelir, 8 saatlik kullanımdan sonra filtre talimatlarda açıklandığı gibi değiştirilmelidir.

Özellikleri:

- Ayarlanabilir elastik bantlar, sıkı oturan bir maske sağlar. Maske otomatik olarak yüzün konturuna uyum sağlar.
- Maske takarken gözlüklerin buğulanması yok
- Bu nedenle daha uzun bir süre boyunca cilt tahrişi mümkün değildir - cilt dostu PET malzeme
- Değiştirilebilir filtre ve maske gövdesinin çoklu kullanımı
- Maske gövdesini geri dönüştürün - PET yeniden kullanılabilir
- Kısıtlama olmadan konuş
- Eşsiz nefes alma rahatlığı - kolaylıkla nefes alın ve nefes verin
- Filtre ıslanmaz ve böylece 8 saat boyunca tam koruyucu etkisini korur.

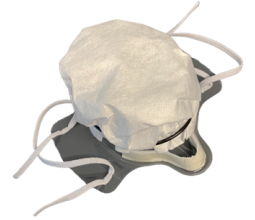

Etiketleme:

- İsim ve/veya üretici kimliği: **Mematec Products GmbH, MC-P088-50-001**
- CE işareti + üretim kontrol noktası: **CE 0161**
- Üreticinin adı veya markası: **Fonna PSA, Sınıf III**
- Son kullanma tarihi, parti numarası: **Maske üzerinde bir etiketle işaretlenmiştir**
- Sınıflandırma: **FMP2**
- Maske, EN1827: **2009-11 test standardına göre test edilmiştir.**
- Değiştirilebilir filtreli maske (**yalnızca Mematec filtre malzemesi ile maske yasal standardı karşılar**)

Maskenin tüm parçaları ve maske yapısı "Made in Germany" dir.
Maske patent korumalıdır.


Paketleme birimi: PE torba başına 7 maske + maske başına 10 filtre eki



1. Lastik bantları takın Yan ve elinizle tutun.



2. Maskeyi çenenize koyun ve elastik bantları kulaklarınızın arkasından çekin.

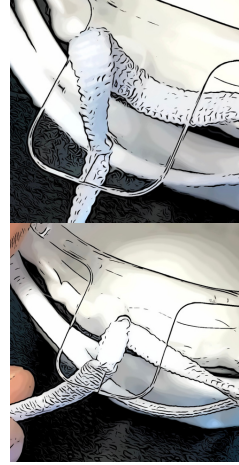

3. Elastik bantları ayarlayın İhtiyaç için.



4. Maskenin rahatça oturduğundan ve yüzünüzün çevresini sardığından emin olun.


ÖNEMLİ KULLANIM:

Bir FFP2 maskesinin tam koruyucu etkisini geliştirmesi için, bu ekteki kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılmalıdır. Diğer şeylerin yanı sıra, maskenin yüze doğru oturması ve bağların hizalanması garanti edilmelidir. Nefes darlığı veya baş dönmesi durumunda maske derhal çıkarılmalıdır!


Dikkat!

Sadece optimum uyum maskenin tanımlanmış korumayı sunmasını sağlar !!!


Maske Gövdesinin Filtre Değişimi Ve Temizliği

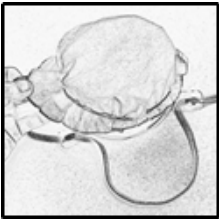

1. Eski filtreyi çıkarmak için üstteki tırnağı kavrayın.
2. Filtreyi maske gövdesinden çıkarmak için tırnağı kullanın.

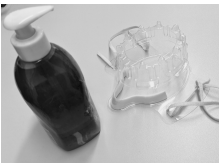


2. Maske gövdesini nötr pH'lı bir sabunla iyice temizleyin. Ardından maskeyi tamamen kurulayın.

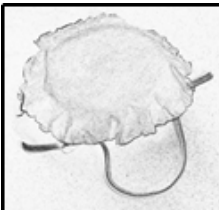

3. Üzerine yeni bir filtre koyun. Maske gövdesi. Filtre, O-ring tutucu üzerinde eşit aralıklarla yerleştirilmelidir. çekilecek.


Lifli eritilerek şişirilmiş katman, PET temel gövdesinin içine monte edilmelidir. Böylece pürüzlü dokulu spunbond tabakası dışa bakar.

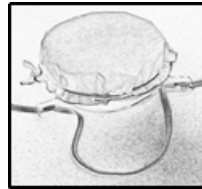

4. O-ringi maske gövdesindeki yeni filtrenin üzerine yerleştirin. O-ringi braketlerin üzerinden eşit şekilde çekin. Filtrenin sıkı olduğundan emin olun.

Kontrol:

Filtre değiştirildikten sonra filtrenin sıklığı kontrol edilmelidir. Filtre, PET muhafazasının üzerine sıkıca çekilmelidir!

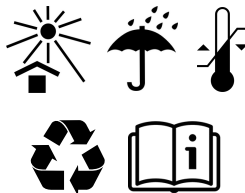

Üretici firma:

Mematec Products GmbH
August-Müller-Straße 24
71691 Freiberg am Neckar
info@mematec.com